

Ръководство на потребителя за възглавница за шиаци масаж Beurer MG 145



Прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

1. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Устройството е предназначено само за домашна/лична употреба, а не за търговска употреба.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Ако захранващият кабел на това устройство е повреден, той трябва да се изхвърли. Ако не може да се отстрани, устройството трябва да се изхвърли.
- Устройството има гореща повърхност. Лицата, които са чувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато използват уреда.
- Никога не поставяйте никакви предмети в отворите на устройството и никога не поставяйте нищо във въртящите му се части. Уверете се, че всички движещи се части могат да се движат свободно по всяко време.
- При никакви обстоятелства не трябва да отваряте или поправяте устройството сами, тъй като безупречната функционалност не може да бъде гарантирана след това. Неспазването ще доведе до анулиране на гаранцията.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.



2. ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА ПРИ ДОСТАВКА:

Проверете дали опаковката на устройството не е била повредена и се уверете, че цялото съдържание е налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреди по устройството или аксесоарите и че целият опаковъчен материал е отстранен. Ако имате някакви съмнения, не използвайте устройството и се свържете с вашия търговец или потърсете помощ на посочения адрес за обслужване на клиенти.

- 1 x Шиаци възглавница за масаж
- 1 x махаща се калъфка
- 1 x Захранващ блок
- 1 x Тези инструкции за експлоатация

3. ВАЖНИ СИМВОЛИ И ЗНАЦИ:

Следните символи са използвани върху устройството, в тези инструкции за употреба, върху опаковката и върху табелата на устройството:

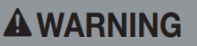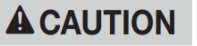	Предупредителна бележка, показваща риск от сериозно нараняване или смърт.
	Показва потенциално непосредствена опасност. Ако не бъде избегната, могат да възникнат леки наранявания.
	Показва потенциално опасна ситуация. Ако не бъде избегната, устройството или нещо в близост до него може да се повреди.
	Бележка: Бележка за важна информация.
	Прочетете инструкциите.

	Устройство с клас на защита II.
	Само за употреба на закрито.
	Отделете елементите на опаковката и ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.
	Маркировка за идентифициране на опаковъчния материал. A = Код на материала, B = Номер на материала: 1-7 = Пластмаса, 20-22 = Хартия и картон
	Електронното устройство не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
	Производител.
	Този продукт отговаря на изискванията на приложените европейски и национални директиви.
	Продуктите доказуемо отговарят на изискванията на техническите регламенти на ЕАЕС.
	Прав ток.
	Полярност на d.c. захранващ конектор.
	Захранващ блок с превключващ режим.
	Защитен изолиращ трансформатор, защита от късо съединение.
	Ниво на енергийна ефективност 6.
	Знак за оценено съответствие на Обединеното кралство.
	Вносител.
	Отделете продукта и елементите на опаковката и ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.
ta=40°C	Номинална температура на околната среда.

4. ПРАВИЛНА УПОТРЕБА:

Този уред е предназначен само за масажирание на отделни части от човешкото тяло. Той не може да замести медицинското лечение. Не използвайте устройството за масаж, ако някое от следните предупреждения се отнася за вас. Моля, консултирайте се с вашия лекар, ако не сте сигурни дали устройството за масаж е подходящо за вас.

⚠ WARNING

Използването на масажното устройство е забранено в следните случаи:

- върху животни;

- при промени, предизвикани от гръбначни заболявания или наранявания (напр. дискова херния, открити рани);
- за масаж на сърдечната област при хора с поставен пейсмейкър (консултирайте се с лекар преди да използвате уреда върху други зони на тялото при хора с пейсмейкър;
- върху подути, изгорени, възпалени или повредени кожа или части на тялото;
- при наличие на разкъсани рани, капиляри, разширени вени, акне, купероза, херпес или други кожни заболявания;
- при бременност;
- върху лицето (очите), ларинкса или други чувствителни зони на тялото;
- за масаж на ходилата;
- по време на сън;
- никога не използвайте устройството след прием на лекарства или алкохол (намалено ниво на съзнание);
- в автомобил.

Консултирайте се с лекар преди да използвате уреда:

- ако страдате от някакво заболяване или се възстановявате от операция в горната част на тялото;
- ако имате поставен пейсмейкър или имплант;
- при тромбози, диабет или болка с неустановен характер;
- при болки с неизяснен произход.

Устройството е предназначено само за целта, описана в тази инструкция за експлоатация. Производителят не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилна или небрежна употреба.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация. Неспазването на предоставената по-долу информация може да доведе до нараняване или материални щети. Съхранявайте тези инструкции на сигурно място, където могат да бъдат прочетени и от други лица, използващи устройството. Винаги предавайте тези инструкции заедно с уреда, ако го продавате или давате на друг човек.

⚠ WARNING

Дръжте децата далеч от опаковъчните материали. Риск от задушаване.

⚠ WARNING

Токов удар:

Както всеки друг електрически уред, с този масажен уред трябва да се работи внимателно, за да се предотврати риска от токов удар.

Поради тази причина устройството трябва да работи само както следва:

- само с доставения захранващ блок при мрежовото напрежение, посочено на захранващия блок;
- не бива да използвате устройството, ако има очевидна повреда в самия уред или някой от аксесоарите му;
- никога не трябва да използвате уреда по време на гръмотевична буря.

В случай на повреда или неизправност, незабавно изключете устройството и го изключете от захранването. Никога не дърпайте захранващия кабел или уреда, за да изключите захранването от контакта.

Никога не дръжте и не носете устройството за захранващия кабел. Дръжте кабелите далеч от горещи повърхности. Не прищипвайте, прегъвайте или усуквайте кабелите.

Не забождайте карфици, игли или остри предмети в устройството.

Уверете се, че устройството за масаж, превключвателят, захранващият блок и кабелът не влизат в контакт с вода, влага или други течности. Затова използвайте уреда само в сухи вътрешни помещения (например никога във ваната, сауната).

- Никога не се опитвайте да извадите устройството, ако падне във вода. Незабавно извадете щепсела от контакта.
- Не използвайте устройството, ако има очевидна повреда на самото устройство или някой от аксесоарите му.
- Не подлагайте устройството на удари и не го изпускайте.

⚠ WARNING

Поправки:

- Ремонтите на електрическите уреди трябва да се извършват само от квалифицирани лица. Неправилните ремонти могат да доведат до значителна опасност за потребителя. В случай на ремонт, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти или оторизиран дилър.
- Ципът на уреда за шияцу масаж не трябва да се отваря. Той е монтиран само поради причини, свързани с производството на устройството.

⚠ WARNING

Опасност от пожар:

Съществува риск от пожар, ако устройството се използва неправилно или ако не се използва в съответствие с тези инструкции за експлоатация.

Поради тази причина масажното устройство трябва да работи само както следва:

- Никога не използвайте устройството под покривала като одеяла или възглавници.
- Никога не използвайте уреда в близост до бензин или други лесно запалими материали.

⚠ CAUTION

Работа с устройството:


Изключвайте уреда и изключвайте захранването след всяка употреба и преди всяко почистване.

- Никога не сядайте или стойте върху движещите се части на устройството с цялата си тежест и не поставяйте предмети върху устройството.
- Пазете устройството от високи температури.

6. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА:

Отпред:

1. 4 масажирани глави с подгряване и осветление
2.  ВКЛ/ИЗКЛ
3. Захранване

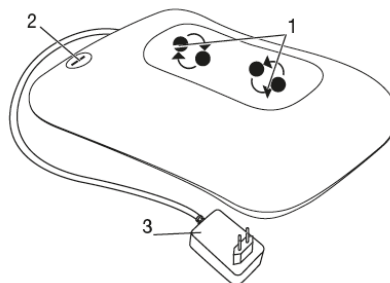

7. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА:

- Разопакувайте уреда.
- Проверете уреда, захранването и кабелите за повреди.
- Можете да използвате уреда със или без калъф.
- Свържете захранването към уреда.
- Прокарайте кабела безопасно, така че да няма риск някой да се спъне в него.
- Свържете уреда към електрическата мрежа.

8. УПОТРЕБА:

Внимателно подпрете частта от тялото си, която искате да масажирате, върху уреда. Уверете се, че сте заели удобна позиция преди постепенно да пренесете тежестта си върху уреда. Масажът трябва винаги да бъде приятен и релаксиращ. Спрете уреда, ако почувствате болка или дискомфорт.

- Внимавайте да не заклежите някоя част от тялото си, особено краката, ръцете или пръстите, между въртящите се масажни глави в уреда.
- Включете уреда от бутона . Масажните глави започват да се въртят като в същото време се активират функциите за загряване и светлина.
- Натиснете бутона, за да изключите уреда.

NOTE


- Уредът е по-удобен, ако се използва с калъфа.
- Не използвайте уреда за масаж повече от 15 минути и след това го оставете да се охлади. Използването на уреда за по-дълго време може да стимулира прекалено мускулите и да предизвика напрежение вместо отпускане.



Горна част на гърба



Долна част на гърба

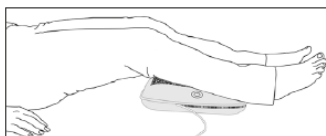

Крака

9. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:



Почистване:

- Преди почистване изключете уреда от бутона и от електрическата мрежа.
- Не допускайте влизането на вода или друг вид течност в уреда.
- Почиствайте леки замърсявания с кърпа или гъба, навлажнена с малко течен миеш препарат за деликатни тъкани. Не използвайте разтворители.
- Свалящият се калъф може да се пере в перална машина на 30°C. Обърнете внимание на символите на етикета.
- Не използвайте уреда преди да е напълно изсъхнал.



Съхранение:

- Ако няма да използвате уреда дълго време, съхранявайте го в оригиналната опаковка на сухо място.

10. ВЪЗНИКВАНЕ НА ГРЕШКИ:

Проблем	Причина	Решение
Масажиращите глави се движат бавно.	Товарът е прекалено голям.	Освободете масажиращите глави.
Масажиращите глави не се движат.	Уредът не е включен в ел. контакт.	Свържете уреда към контакт и го включете от бутона.

11. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ:



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

12. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Захранване: Вход Изход	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A 12,0 V 1,0 A, 12,0 W
Средна активна ефективност	≥ 84,26 %
Ефективност при ниско натоварване (10 %)	≥ 80,06 %
Консумирана мощност без натоварване	≤ 0,068 W
Размери	прибл. 31,0 x 23,0 x 11,0 см
Тегло	прибл. 1,3 грама

13. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.