

## Ръководство на потребителя за мини масажор Beurer MG 18



### I. Полезни съвети и инструкции за безопасност:

- Прочетете тези инструкции за безопасност внимателно преди да използвате това устройство. В противен случай рискувате да се нараните или да претърпите материални щети. Запазете това ръководство за по-нататъшна употреба. Ако дадете това устройство на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Това устройство е предназначено за масаж на отделни части от човешкото тяло. То не може да замени медицинско лечение. Не използвайте масажора, ако едно или няколко от следните предупреждения се отнасят за вас. Ако не сте сигурни дали масажорът е подходящ за вас, моля, консултирайте се с вашия лекар.

#### Не използвайте устройството:

- върху животни;
- ако страдате от медицински проблем или сте се наранили в зоната, която ще масажирате (напр. дискова херния, открити рани);
- ако ще масажирате зоната на гърдите, а имате пейсмейкър – моля консултирайте се с вашия лекар;
- върху подута, изгорена или наранена кожа и части на тялото ви;
- по време на бременност;
- по лицето (очите), по ларинкса или други особено чувствителни части на тялото.
- Устройството е предназначено само за целта, описана в тези инструкции за употреба. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба.
- **Относно батериите:**
  - Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
  - Опасност от задавяне! Пазете батериите далече от деца. Поглъщането на батериите може да бъде изключително опасно.
  - Ако батерия протече трябва да си сложите защитни ръкавици и да изхвърлите устройството.
  - Не излагайте батерията на високи температури.
  - Не хвърляйте батерията в огън – опасност от експлозия!
  - Не използвайте презаредими батерии.
  - Не отваряйте, разглобявайте или мачкайте батериите.
- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. Неправилните ремонти могат да изложат потребителите на значителна опасност. За ремонт, моля, свържете се с търговеца от когото сте закупили продукта.

- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.

#### Важно:

- Уредът трябва да се изключва след всяка употреба и преди почистване.
- Уверете се, че в устройството няма заклещени косми/мъх.
- Избягвайте контакт между устройството и остри предмети.
- Пазете устройството далеч от източници на топлина, които са разположени прекалено близо до устройството, като например фурни, нагреватели или дори пряка слънчева светлина.

## II. Преглед на продукта:


1. Бутон за Включване/ Изключване
2. Функция Затопляне



## III. Първоначална употреба:

1. Премахнете всички опаковки от устройството.
2. Проверете устройството за видими признаци на повреда.
3. Поставете батериите в устройството (A):

Отворете капака на отделението за батерии, за да го отворите. Поставете 3 бр. AAA батерии като спазите правилния им поляритет. Затворете капака на отделението за батерии.

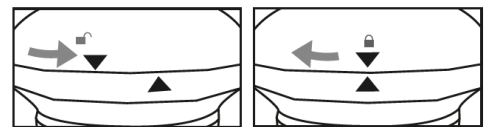

## IV. Употреба:


Включете масажора като натиснете бутона за Включване/Изключване (B) . Използвайте една или двете си ръце, за да насочите устройството към зоната на тялото, която ще се масажира. Може да бъдете седнали, изправени или легнали. Това ви позволява да използвате устройството за самостоятелен масаж върху себе си или за масажирание на други хора.

Можете да промените интензивността на масажа, като притиснете масажора по-силно или по-леко към кожата си.

Не масажирайте дадена част от тялото си за повече от 3 минути. След тези три минути трябва да преминете към масаж на друга част на тялото ви.

Натиснете отново бутона за Включване/Изключване, за да изключите масажора.

Не използвайте масажора малко преди лягане. Масажът може да има и стимулиращ ефект и да причини смущения на съня ви.

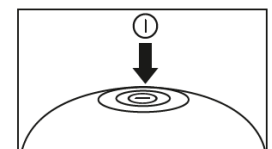

**Предупреждение:** Масажът трябва да е приятен и релаксиращ през цялото време. Ако изпитвате болка или неудобство по време на масажа трябва да го прекратите или да смените позицията на масажора върху тялото си.

## V. Почистване и поддръжка:

### Почистване:

- Когато изстине, забършете устройството с влажна кърпа, която е леко навлажнена. Може да използвате мек миещ препарат като допълнение към водата върху парцала.
- Почистете устройството, като използвате само посочените методи. Течността не трябва да прониква в устройството или аксесоарите при никакви обстоятелства.

### Поддръжка:

- Не използвайте устройството отново, докато не изсъхне напълно.

- Съхранявайте масажора на хладно и сухо място, недостъпно за деца. Препоръчваме да съхранявате устройството в оригиналната му опаковка.

## VI. Регулаторна информация:



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово / Cd = Батерията съдържа кадмий / Hg = Батерията съдържа живак



Не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

## VII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

**Производител:** Beurer GmbH

**Адрес:** Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

**Телефон:** +497 313 9890

**Имейл:** [customerservice@beureruk.com](mailto:customerservice@beureruk.com)

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).