

Ръководство на потребителя за мини масажор Beurer MG 18



Прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба. Направете ги достъпни за други потребители и отбележете информацията, която съдържат.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Устройството има гореща повърхност. Лицата, чувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато използват уреда.
- При никакви обстоятелства не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. Ако го направите, устройството вече може да не функционира правилно. Неспазването на това ще анулира гаранцията на уреда.

1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА:

Проверете дали външната страна на картонената опаковка за доставка е непокътната и се уверете, че цялото съдържание е включено в доставката. Преди употреба се уверете, че няма видими повреди по устройството или аксесоарите и че целият опаковъчен материал е отстранен. Ако имате някакви съмнения, не използвайте устройството и се свържете с вашия търговец или потърсете помощ на посочения адрес за обслужване на клиенти.

- 1 x Мини масажор
- 3 x AAA батерии
- 1 x тези инструкции за употреба

2. ВАЖНИ СИМВОЛИ И ЗНАЦИ:

Следните символи са използвани в тези инструкции за употреба и върху типовата табела на уреда:

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупредителна бележка, показваща риск от нараняване или увреждане на здравето.
	ВАЖНО: Бележка за безопасност, показваща възможна повреда на устройството/аксесоара.

	Информация за продукта. Обърнете внимание на важна информация.
	Постоянен ток.
	Прочетете инструкциите за употреба.
	Производител.
	Маркировка за идентифициране на опаковъчния материал. A = Код на материала, B = Номер на материала: 1-6 = Пластмаса, 20-22 = Хартия и картон
	Изхвърляне в съответствие с Директивата на ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване – WEEE.
	Този продукт отговаря на изискванията на приложимите европейски и национални директиви.
	Продуктите доказано отговарят на изискванията на техническите регламенти на ЕАЕС.
	Знак за оценено съответствие на Обединеното кралство.
	Разделете продукта и елементите на опаковката и ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.
	Символ за вносител.

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- **Не използвайте устройството:**
 - върху животни;
 - ако страдате от медицински проблем или сте се наранили в зоната, която ще масажирате (напр. дискова херния, открити рани);
 - ако ще масажирате зоната на гърдите, а имате пейсмейкър – моля консултирайте се с вашия лекар;
 - върху подута, изгорена или наранена кожа и части на тялото ви;
 - по време на бременност;
 - по лицето (очите), по ларинкса или други особено чувствителни части на тялото;
 - докато спите;
 - след прием на лекарства или алкохол (нарушена когнитивна способност!).
- Преди да използвате масажора, трябва да се консултирате с Вашия лекар:
 - ако имате тежко заболяване или наскоро сте претърпели операция;
 - ако имате настинка с висока температура, разширени вени, тромбоза, флебит, жълтеница, диабет, нервни заболявания (напр. ишиас) или остри възпаления.

Устройството е предназначено само за целта, описана в тези инструкции за употреба.

Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Прочетете внимателно тези инструкции за употреба! Неспазването на следната информация може да доведе до нараняване или материални щети. Запазете тези инструкции за употреба и ги направете достъпни за други потребители. Уверете се, че ще предадете тези инструкции за употреба, когато давате устройството на други хора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пазете опаковъчния материал далеч от деца. Съществува риск от задушаване.

■ **Относно батериите:**

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- **Опасност от задавяне!** Пазете батериите далече от деца. Поглъщането на батериите може да бъде изключително опасно.
- Ако батерия протече трябва да си сложите защитни ръкавици и да изхвърлите устройството.
- Спазвайте знаците за полярност плюс (+) и минус (-).
- Не излагайте батерията на високи температури.
- Не хвърляйте батерията в огън – опасност от експлозия!
- Не използвайте презаредими батерии.
- Не подлагайте батериите на късо съединение.
- Не отваряйте, разглобявайте или мачкайте батериите.
- Ако устройството няма да се използва за дълъг период от време, извадете батериите от отделението за батерии.
- Използвайте само идентични или еквивалентни видове батерии.
- Винаги сменяйте всички батерии едновременно.



Поправки:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. Неправилните ремонти могат да изложат потребителите на значителна опасност. За ремонт, моля, свържете се с търговеца от когото сте закупили продукта.



Риск от пожар:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Съществува риск от пожар, ако устройството се използва неправилно или тези инструкции за употреба се пренебрегнат.
- Следователно масажорът трябва да работи, както следва:
 - винаги контролирайте употребата на устройството, особено ако наблизо има деца.
 - Никога не работете с масажора под покривало, като одеяло, възглавница и др.



Боравене:

ВАЖНО:

- Уредът трябва да се изключва след всяка употреба и преди почистване.
 - Уверете се, че в устройството няма заклецена коса.
 - Избягвайте контакт с остри предмети.
 - Пазете устройството от източници на топлина, които са прекалено близо до него, като фурни, нагреватели или пряка слънчева светлина.

5. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

1. Бутон за Включване/ Изключване
2. Функция Затопляне



6. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА:

1. Премахнете всички опаковки от устройството.
2. Проверете устройството за видими признаци на повреда.
3. Поставете батериите в устройството (A):

Отворете капака на отделението за батерии, за да го отворите. Поставете 3 бр. ААА батерии като спазите правилния им поляритет. Затворете капака на отделението за батерии.

A



7. УПОТРЕБА:


Включете масажора като натиснете бутона за Включване/Изключване (B) . Използвайте една или двете си ръце, за да насочите устройството към зоната на тялото, която ще се масажира. Може да бъдете седнали, изправени или легнали. Това ви позволява да използвате устройството за самостоятелен масаж върху себе си или за масажирание на други хора.

Можете да промените интензивността на масажа, като притиснете масажора по-силно или по-леко към кожата си.

Не масажирайте дадена част от тялото си за повече от 3 минути. След тези три минути трябва да преминете към масаж на друга част на тялото ви.

Натиснете отново бутона за Включване/Изключване, за да изключите масажора.

B

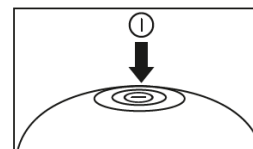

Не използвайте масажора малко преди лягане. Масажът може да има и стимулиращ ефект и да причини смущения на съня ви.



Предупреждение:

Масажът трябва да е приятен и релаксиращ през цялото време. Ако изпитвате болка или неудобство по време на масажа трябва да го прекратите или да смените позицията на масажора върху тялото си.

8. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

Почистване:

- Когато изстине, забършете устройството с влажна кърпа, която е леко навлажнена. Може да използвате мек миещ препарат като допълнение към водата върху парцала.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Почистете устройството, като използвате само посочените методи. Никакви течности не трябва да проникват в устройството или аксесоарите му при никакви обстоятелства. Устройството трябва да изсъхне напълно преди да го използвате отново.

Съхранение:

- Съхранявайте масажора на хладно и сухо място, недостъпно за деца. Препоръчваме да съхранявате устройството в оригиналната му опаковка.

9. В СЛУЧАИ НА ПРОБЛЕМИ:

Проблем	Причина	Решение
---------	---------	---------

Масажорът не работи	Няма поставени батерии/батериите са изтощени.	Следвайте инструкциите под „Поставяне на батериите“.
	Устройството не е включено.	Включете устройството.

10. ИЗХВЪРЛЯНЕ:



ВАЖНО:



Не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с местните власти, отговорни за изхвърлянето на отпадъци. Можете да получите местоположението на пунктовете за събиране на стари устройства от местните или общински власти, местните компании за изхвърляне на отпадъци или от вашия търговец на дребно.

11. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Захранване:	3 x 1,5 V AAA батерии LR03
Размер:	10 x 10 x 9,8 см
Тегло:	Прибл. 150 гр

12. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

- Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
- Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
- Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
- Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.