

Ръководство на потребителя за масажор Beurer MG 24



I. Включено в опаковката:

- 1 бр. масажор със затопляща функция
- 3 бр. взаимно заменими масажни приставки
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

II. Предназначение на уреда:

Това устройство е предназначено за масаж на отделни части на тялото ви. Важно е да знаете, че той не е заместител на медицинското лечение. Ако не сте сигурни, че масажорът е подходящ за вас, моля консултирайте се с Вашия лекар.


III. Полезни инструкции и инструкции за безопасност:

- Прочетете тези инструкции за безопасност внимателно преди да използвате това устройство. В противен случай рискувате да се нараните или да претърпите материални щети. Запазете това ръководство за по-нататъшна употреба. Ако дадете това устройство на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Уредът може да се използва от деца над 8 години и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Уредът става много горещ по време на работа. Ако сте чувствителни към топлина трябва да го използвате с повишено внимание.
- Този уред не е заместител на лекарска помощ. Предназначен е за употреба върху отделни части на тялото у дома.
- Не използвайте този уред в следните случаи:
 - Върху животни;
 - При хора с дискова херния или други гръбначни или прешлени проблеми;
 - В зоната на гърдите при хора, които имат пейсмейкър;
 - Върху подута, изгорена или разранена кожа;
 - Ако сте бременна;
 - Върху лицето (очите), върху гърлото си (ларинкса) или върху други чувствителни части на тялото;
 - Докато спите или ако сте под въздействието на алкохол или друг упойващи вещества.
- Консултирайте се с лекар преди да използвате този уред в следните случаи:
 - Ако страдате от тежко заболяване или се възстановявате след операция;
 - Ако страдате от следните заболявания/симптоми: обикновена настинка, придружена от треска; разширени вени; тромбоза; флебит; жълтеница; диабет; заболявания на нервната система (например ишиас) или остри възпаления.
- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.
- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред. Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда – риск от токов удар!

- Не използвайте уреда при видими следи от повреда – риск от токов удар.
- Никога не използвайте уреда по време на буря – риск от токов удар!
- Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.
- В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го държите за кабела – риск от токов удар!
- Дръжте кабела далеч от горещи повърхности!
- Не използвайте устройството в близост до вода или във влажни помещения – риск от токов удар! Не мокрете уреда и кабела му.
- Пипайте уреда и кабела му само със сухи ръце, в сухи стаи, никога в баня, във вана, в сауна или под душа. Никога не използвайте уреда навън.
- Ако изпуснете уреда във вода никога не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов удар! Веднага извадете уреда от контакта.
- Никога не оставяйте уреда включен без надзор, особено в случаите, когато има деца наблизо!
- Не покривайте уреда с нищо (например одеяла или възглавници).
- Винаги изключвайте уреда след употреба и преди чистене и го вадете от електрическото захранване.
- При всяка употреба се уверете, че всички движещи се части се движат свободно.
- Уверете се, че в уреда не могат да попаднат косми.
- Не прегъвайте и повреждайте кабела.
- Дръжте остри предмети далеч от уреда и кабела му.
- Уверете се, че уредът е далеч от източници на топлина (печки, радиатори и т.н.).

IV. Преглед на уреда:

1. Бутон за вкл./изкл.
 - Lo = нежен масаж с вибрации
 - Hi = мощен масаж с вибрации
 - P1: масажна програма 1
 - P2: масажна програма 2
2. Опционална функция на затопляне
3. Взаимно заменими масажни приставки

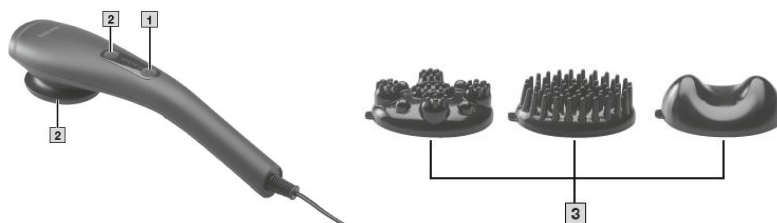

V. Употреба:

Първоначална употреба:

- Махнете всички опаковки от уреда. Уверете се, че няма видими следи от повреда върху уреда и частите му.
- Включете уреда в контакта, но преди това задължително се уверете, че е изключен. Уредът вече ще бъде в режим „Готовност“.

Употреба:

- Изберете предпочитаната от вас интензивност на масажа или програма за масаж чрез натискане на бутона за вкл./изкл.
- Използвайте едната или двете си ръце, за да насочите устройството към областта на тялото, която искате да масажирате. Може да сте седнали, изправени или легнали, когато използвате масажора. Това означава, че може да използвате устройството, за да масажирате себе си или друг човек. Можете да промените интензивността на масажа чрез прилагане на повече или по-малко натиск върху масажора и кожата си. Не масажирате определена част от тялото си за повече от 3 минути. След това преминете към масажиране на друга част от тялото си.
- Можете да извършвате масажа с или без масажиреща приставка. За да направите това, изберете приставка за масаж по ваш избор.
- При използване на допълнителната функция за топлина, вече поставените приставки за масаж възпрепятстват топлинното приложение. Следователно устройството трябва да бъде без приставка за масаж, когато използвате функцията за затопляне.

Важно:

- Не използвайте масажора малко преди лягане. Масажът може да има и стимулиращ ефект и да причини смущения на съня.
- Масажът трябва да е приятен и да не причинява дискомфорт. Ако почувствате болка или неразположение – спрете масажа или преместете уреда на друго място на тялото си.

VI. Почистване и поддръжка:

- Изключвайте уреда преди всяко почистване и го вадете от тока. Уверете се, че уредът е напълно изстинал преди да го почистите.
- Използвайте мека леко влажна кърпа, за да почистите уреда. Може да използвате и лек почистващ препарат.
- Не допускайте вода да влезе в уреда и не го мокрете.
- Уредът трябва да е напълно сух преди да го използвате отново.
- Съхранявайте уреда на сухо и хладно място, далеч от обсега на деца. Препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка.

Ремонти:

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. Регулаторна информация:



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.

VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.